



# OPTIC-4 软件

## Evolution Workstation

Evolution Workstation 为客户提供较为先进的 OPTIC 进样口控制。基于多年的研发，扩展了 OPTIC-4 的功能并优化了分析输出。

### 多模进样口(MMI)软件的特点

- 每台 OPTIC-4 均提供标准配置
- 在运行或待机状态下随时填写状态信息
- 实时图形化显示运行时参数
- 可设置多柱配置
- 简单分析方法定义和开发
- 自动生成方法优化序列
- 可以保存每次进样的运行时数据
- 在待机状态下直接控制仪器
- 多达 9 阶的压力或流量编程
- 系统和方法日志文件
- 具有两个访问级别的密码保护
- 内置色谱柱流速/压力计算器
- 用于 GC×GC 全二维气相色谱 的调制器控制
- 中心切割开关控制
- USB 或 LAN 接口链接仪器
- 兼容 Windows 10 和 11
- 通过 Chronos 主软件集成到其他气相控制软件中
- 无需额外费用

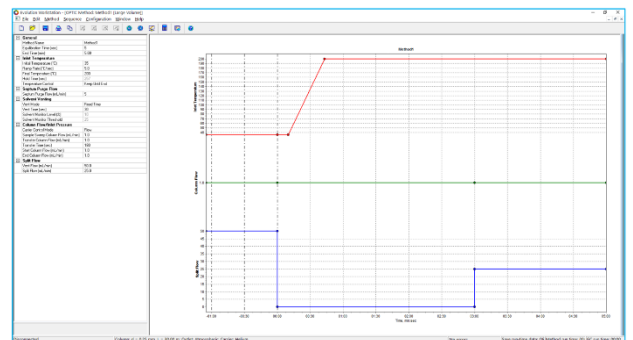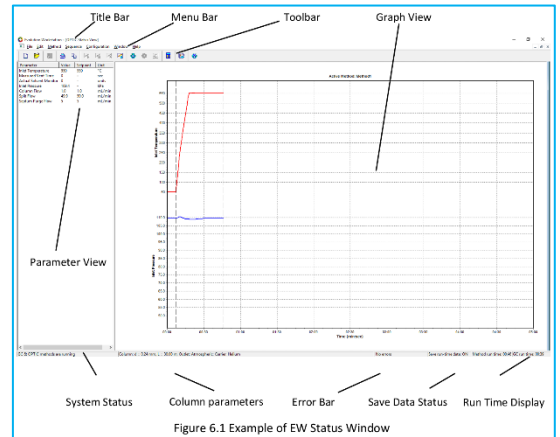

状态视图



方法窗口



2 根色谱柱



流量计算器



GC×GC 计算器

如果您想获取该软件的最新版本，请发送电子邮件联系我们。

技尔(上海)商贸有限公司  
GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司 地址:上海市长宁区仙霞路319号 远东国际广场A座902-903室 电话:021-62782272	●技尔应用技术中心 地址:上海市徐汇区桂林路418号 1号楼701室 电话:021-64260228	●技尔成都分公司 地址:成都市锦江区东御街18号 百扬大厦2602室 电话:028-85596177	●技尔广州办事处 地址:广州市天河区天河北路233号 中信广场办公楼3217单元 电话:400-089-1889
官网:www.glsciences.cn		服务热线:400-089-1889	



技尔(上海)官方网站 技尔(上海)官方微信公众号

邮箱:contact@glsciencs.com.cn

## Chronos 主软件

Chronos 软件可搭配 PAL 系统的样品制备的同步开展。这能更充分地利用分析系统，同时观察每个样品制备的时间余量。除此之外该软件还具有较多其他优势：界面简单、易操作，一定程度上减少需要根据应用进行更改的参数数量。相关的值以表格形式记录，且可由用户更改，只需几个步骤就可以生成完整的样本列表。可根据需要在方法编辑器中更改固定参数。

Evolution Workstation 可通过 Chronos 主软件集成到其他气相控制软件中。

与其他数据系统的连接正在开发中。

## 技尔(上海)商贸有限公司

GL Sciences (Shanghai) Ltd.

●上海总公司

地址:上海市长宁区仙霞路319号

远东国际广场A座902-903室

电话:021-62782272

●技尔应用技术中心

地址:上海市徐汇区桂林路418号

1号楼701室

电话:021-64260228

●技尔成都分公司

地址:成都市锦江区东御街18号

百扬大厦2602室

电话:028-85596177

●技尔广州办事处

地址:广州市天河区天河北路233号

中信广场办公楼3217单元

电话:400-089-1889

